

Daring WHITE™

Professional Teeth Whitening

Patent Pending

Caution: Regulations restrict dispensing of this product. To be sold only to a licensed dental professional.

DRM Green
European Compliance Services Ltd
Beaver House, 23-38 Hythe Bridge St, Oxford OX1 2EP, UK

European Office
Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
D-52531 Uebach-Palenberg
Germany
+49.2451.971.409

www.daringwhite.com

Headquarters
Garrison Dental Solutions
150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI 49456
USA

Garrison
Dental Solutions
www.daringwhite.com

Manufactured for Garrison Dental Solutions

1757/0118rev A Made in China

Daring[™]WHITE

Professional Teeth Whitening

Complete Application Instructions
Instrucciones completas para su aplicación
Instructions complètes d'application
Vollständige Anwendungsanleitung
Istruzioni Complete dell'applicazione
Kompletní návod k použití
Komplet Påføringsvejledning
Täydelliset käyttöohjeet
Teljes Alkalmazási Utasítás
Complete applicatie-instructies
Fullstendige instruksjer
Instruções de Utilização Completa
Instruktioner

15% Carbamide Peroxide Whitening Film
(5.5% Released Hydrogen Peroxide)

Garrison
Dental Solutions
www.daringwhite.com

Description

Daring White™ whitening films are the most comfortable, patient friendly whitening system available today. These films are designed to adhere to teeth for 1 to 2 hours to take advantage of the proprietary carbamide peroxide composition.

PLEASE NOTE: removal before 30 minutes can be done, but is more difficult, may tear and come off in pieces.

Counter Indications

- Do not smoke during whitening treatment.
- Avoid contact with eyes. If contact occurs flush with copious amounts of water.
- Avoid direct contact of the active surface of the film with the gums and/or salivary flow.
- Not for use by women who are pregnant or nursing.
- Not for use by children under 18 years of age.
- Avoid contact with clothing.
- Do not swallow the film.
- If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gum or mouth occurs, discontinue use and consult a dentist.
- If you brux or grind your teeth, do not wear overnight.
- Do not use if allergic to peroxides like hydrogen peroxide.
- Whitening will not affect porcelain crowns and veneers tooth colored acrylic restorations or amalgam.

Storage & Handling

- Keep the product refrigerated to maintain maximum shelf life.
- Do not store above 40°F (5°C). Do not freeze. Best use before date on label.
- Do not use if the packaging has been damaged, or if the seals are found to be broken or open.
- 15% initial concentration of carbamide peroxide. The concentration may change due to the nature of peroxide and this unique formulation.

Shelf Life: 36 months



Attention - Refer to the instructions for use and complete information.



Oxidizer - Avoid contact with reactive substances.




Storage Temperature - Store product at the indicated temperature.

R_p

To be sold only to dental practitioners.




For one-time use only

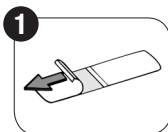

Remove paper exposing the whitening side of the film as shown.



Center film and place straight edge against teeth at gum line.

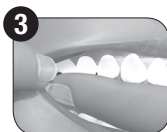

Pull cheek away and push film onto back teeth.



Fold notched edge of film to back side of teeth.



To remove, grasp one corner and pull down away from front of teeth, then push film away from back of teeth.



Brush or rinse away any remaining gel. Rinse to sink.

Disclaimer: Garrison Dental Solutions believes this information to be accurate and is offered only for the benefit of its customers for use of the product under prescribed conditions. This document is not to be considered a warranty or guarantee of product performance, and Garrison Dental Solutions is not legally bound to such claims based on this document.

Descripción

La película blanqueadora Daring White™ es el sistema de blanqueamiento más cómodo y agradable disponible hoy en día. Estas películas están diseñadas para adherirse a los dientes durante 1 ó 2 horas y así aprovechar su exclusiva composición de peróxido de carbamida. **TENGA EN CUENTA QUE:** se pueden retirar las películas antes de los 30 primeros minutos, pero es más difícil y pueden romperse y desprenderse en pedazos.

Contraindicaciones

- No fumar durante el tratamiento blanqueador.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante cantidad de agua.
- Evitar el contacto directo de la superficie activa de la película con las encías y/o el flujo salival.
- No usar en mujeres embarazadas o en fase de lactancia.
- No usar en personas menores de 18 años.
- Evitar el contacto con la ropa.
- No ingerir la película.
- En caso de irritación (enrojecimiento, hinchazón, dolor) de las encías o de la boca, interrumpir el uso y consultar a un dentista.
- Si rechina los dientes (bruxismo), no usar durante la noche.
- No usar en caso de alergia a peróxidos como el peróxido de hidrógeno.
- El blanqueamiento no afectará al color del diente en coronas de porcelana ni a las carillas, restauraciones acrílicas o amalgamas.

Almacenamiento y manejo

- Mantener el producto refrigerado para aumentar la vida útil.
- No conservar por encima de 5°C. Usar preferentemente antes de la fecha especificada en la etiqueta.
- No usar si el envase está dañado o si los precintos están rotos o abiertos.
- Concentración inicial del 15% de peróxido de carbamida. La concentración puede cambiar debido a la naturaleza del peróxido y de esta fórmula única.

Vida útil: 36 meses



Atención - Consulte las instrucciones de uso para obtener información adicional.



Oxidante - Evite el contacto con sustancias reactivas.




Temperatura de almacenamiento—Almacene el producto a la temperatura indicada.



De venta exclusiva a Odontólogos.




Para un único uso

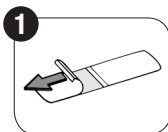

Retire el papel y exponga el lado blanqueador de la película como se muestra.




Centre la película y coloque la regla hacia los dientes en la línea de las encías (margen gingival)

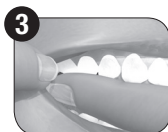

Retirar la mejilla y empujar la película hacia la parte posterior de los dientes.



Doblar el borde de la película hacia la parte posterior de los dientes.

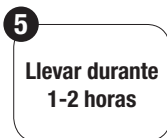

**Llevar durante
1-2 horas**



Para retirar, sujetar una esquina y tirar hacia abajo desde la parte frontal de los dientes, luego empujar la película desde la parte posterior de los dientes.



Cepillar o enjuagar cualquier resto de gel. Enjuagar abundantemente.

Aviso legal: Garrison Dental Solutions considera que esta información es precisa y se ofrece solo para el beneficio de sus clientes para el uso del producto bajo las condiciones prescritas. Este documento no debe ser considerado como una garantía o como garantía de rendimiento del producto y Garrison Dental Solutions no está vinculado legalmente a reclamaciones basadas en dicho documento.

Description

Les films de blanchiment des dents Daring White™ représentent la méthode de blanchiment des dents la plus confortable et conviviale parmi les approches actuellement disponibles. Ces films sont conçus pour adhérer pendant 1 à 2 heures sur les dents afin d'exploiter de manière optimale le peroxyde de carbamide, un composé breveté. VEUILLEZ NOTER: Vous pouvez les enlever avant les 30 premières minutes, mais ce sera plus difficile et ils pourraient se déchirer ou se détacher en morceaux.

Contre-indications

- Ne pas fumer pendant le blanchiment.
- Prévenir tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
- Prévenir tout contact direct de la surface active de la pellicule avec la gencive et/ou la salive.
- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l'allaitement.
- Ne pas utiliser sur des mineurs.
- Prévenir tout contact avec des vêtements.
- Ne pas ingérer le film.
- En cas de survenue d'irritations (comme des rougeurs, des gonflements, des douleurs) affectant la gencive ou la cavité buccale, interrompre l'application et consulter un dentiste.
- Ne pas porter pendant la nuit en cas de bruxisme.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie au peroxyde, notamment au peroxyde d'hydrogène.
- Le blanchiment n'a aucun effet sur les couronnes et facettes en porcelaine ni sur les restaurations dentaires à base d'acrylique ou d'amalgame.

Conservation et manipulation

- Conserver au frais afin de garantir la plus longue durée de conservation possible.
- Ne pas conserver à des températures excédant 5 °C. Ne pas congeler. Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou si les sceaux ne sont pas irréprochables ou ont été ouverts.
- La concentration de peroxyde de carbamide s'élève au début à 15 %. Elle est susceptible d'évoluer en raison de la nature du peroxyde et de la formule unique.

Durée de conservation : 36 mois



Attention - consulter les instructions d'utilisation et les informations produit complètes.



Agent oxydant - Prévenir tout contact avec des substances réactives.



Température de stockage - Conserver le produit à la température indiquée.


R_p

Vente uniquement aux chirurgiens-dentistes.



À usage unique.

1

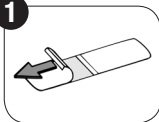


La partie destinée au blanchiment est orientée vers le HAUT. Saisir le film à l'une de ses extrémités et le tirer comme indiqué.

2



Centrer le film et le poser sur les dents au bord de la gencive.

3

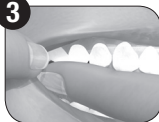

Tirer la joue sur le côté et appliquer le film sur les molaires.

4



Replier le film sur l'arrière des dents pour le fixer. Appuyer fermement sur toutes les surfaces de contact.

5

**Porter
1-2 heures**

6



Pour retirer le film, le saisir à une extrémité et le décoller de la face avant des dents, puis décoller le film de la face arrière des dents.

7



Éliminer les résidus de gel par brossage des dents ou rinçage de la bouche. Évacuer dans le lavabo.

Clause de non-responsabilité: de l'avis de Garrison Dental Solutions, les présentes informations sont exactes et sont uniquement adressées aux clientes et clients dans le cadre de l'utilisation du produit et des conditions indiquées plus haut. Le présent document ne saurait constituer un quelconque engagement ni garantie de performance du produit et Garrison Dental Solutions décline toute responsabilité à l'égard des réclamations reposant sur le présent document.

Beschreibung

Daring White™ Zahnaufhellungsfolien sind das bequemste und kundenfreundlichste Verfahren zur Zahnaufhellung, das heutzutage erhältlich ist. Diese Folien sind darauf ausgelegt 1 bis 2 Stunden an den Zähnen zu haften, um die patentgeschützte Carbamidperoxid-Verbindung optimal zu nutzen.

BEACHTEN SIE BITTE: Eine Entfernung vor dem Ablauf von 30 Minuten kann vorgenommen werden, ist jedoch schwieriger und führt möglicherweise zu einem Reißen der Folie, wodurch diese sich dann nur in kleinen Stücken ablösen lässt.

Hinweise

- Während der Aufhellungsbehandlung nicht rauchen.
- Augenkontakt vermeiden. Sollte es doch dazu kommen, Augen mit reichlich Wasser ausspülen.
- Unmittelbaren Kontakt der mit dem Wirkstoff beschichteten Oberfläche der Folie zu Zahnfleisch und / oder Speichel vermeiden.
- Nicht zu Verwenden bei Schwangerschaft oder während des Stillens.
- Nicht von Minderjährigen zu verwenden.
- Kontakt zur Kleidung vermeiden.
- Folie nicht schlucken.
- Bei Auftreten von Reizungen (wie Rötung, Schwellung, Schmerzen) des Zahnfleisches oder des Mundes Behandlung abbrechen und eine Zahnärztin / einen Zahnarzt aufsuchen.
- Bei Zähneknirschen oder -pressen nicht über Nacht tragen.
- Bei Peroxidallergie etwa gegen Wasserstoffsuperoxid nicht verwenden.
- Die Aufhellung hat keine Wirkung auf Porzellankronen und -verblendungen sowie auf zahnfarbige Acrylrestaurationen oder Amalgam.

Aufbewahrung und Handhabung

- Gekühlt lagern, um die größtmögliche Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Nicht bei Temperaturen über 5°C lagern. Nicht tiefkühlen. Vor dem aufgedruckten Haltbarkeitsdatum verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder die Versiegelungen nicht einwandfrei oder offen sind.
- Die anfängliche Carbamidperoxidkonzentration beträgt 15%. Sie kann sich aufgrund der Beschaffenheit des Peroxids und wegen der einzigartigen Rezeptur verändern.

Haltbarkeit: 36 Monate



Achtung - Ziehen Sie die Anwendungsanleitung und die vollständigen Produktangaben zu Rate.



Oxidationsmittel - Vermeiden Sie den Kontakt zu reaktionsfreudigen Stoffen.



Lagertemperatur - Bewahren Sie das Produkt bei der angegebenen Temperatur auf.


R_p

Verkauf nur an Zahnärzte.



Nur für den einmaligen Gebrauch

1

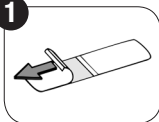

Die aufhellende Seite der Folie zeigt NACH OBEN. Die Folie am Ende greifen und wie abgebildet entnehmen.

2



Die Folie zentrieren und am Zahnfleischrand auf die Zähne legen.

3



Die Wange zur Seite schieben und die Folie auf die Backenzähne aufbringen.

4



Die Wange beiseite ziehen und die Folie auf die hinteren Zähne drücken.

5

**Tragezeit:
1 – 2 Stunden**

6



Zum Entfernen eine Ecke greifen und von der Vorderseite der Zähne abziehen, danach die Folie von der Zahnrückseite wegschieben.

7



Verbleibendes Gel durch Putzen oder Ausspülen entfernen. Durch den Aussuss entsorgen.

Haftungsausschluss: Nach Überzeugung der Garrison Dental Solutions sind diese Angaben zutreffend und sollen ausschließlich den Kundinnen und Kunden bei der Verwendung des Produktes unter den oben dargestellten Bedingungen zugutekommen. Dieses Dokument stellt keine Gewährleistung oder Garantie der Leistung des Produktes dar, und die Garrison Dental Solutions haftet rechtlich nicht für Ansprüche auf der Grundlage dieses Dokumentes.

Descrizione

Daring White™ Le pellicole sbiancanti più confortevoli per i pazienti! Studiate per aderire perfettamente ai denti per la durata di 1-2 ore, così da trarre il massimo vantaggio dall'azione del perossido di carbamide. **ATTENZIONE:** E' possibile rimuovere la pellicola dopo 30 minuti, ma la pellicola potrebbe rompersi, causando una difficile rimozione.

Informazioni

- Non fumare durante il trattamento sbiancante.
- Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso di contatto, sciacquare gli occhi con abbondante acqua.
- Evitare il contatto diretto della superficie attiva della pellicola con le gengive e/o con la saliva.
- Non utilizzare in gravidanza o in fase di allattamento.
- Non usare su pazienti di età inferiore ai 18 anni.
- Evitare il contatto con gli indumenti.
- Non ingerire la pellicola.
- In caso di irritazione alle gengive o alla bocca (arrossamento, gonfiore, dolore muscolare), interrompere l'utilizzo e consultare il proprio dentista.
- Se bruxate o digrignate i denti, non usare durante la notte.
- Non usare in caso di allergia ai perossidi come ad esempio il perossido d'idrogeno.
- Lo sbiancamento non agisce su corone, intarsi, compositi e amalgama.

Conservazione

- Tenere il prodotto in frigo fino alla scadenza.
- Non conservare oltre i 5° C. Non congelare. Non utilizzare oltre la data di scadenza
- Non usare se la confezione è stata danneggiata, o se il sigillo risulta rotto o aperto.
- 15% concentrazione iniziale di perossido carbammide.
La concentrazione potrebbe cambiare a seconda della natura del perossido e della sua formulazione unica.

Data di scadenza: 36 mesi



Attenzione – Leggere le istruzioni per l'utilizzo e per un'informazione completa.



Ossidante -Vietato il contatto con sostanze reagenti.




Temperatura di conservazione
- Conservare il prodotto alla temperatura indicata.



Vendibile solo tramite medici odontoiatri professionisti.




Solo per un utilizzo

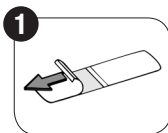

Tirare la pellicola di carta della confezione in modo da vedere la pellicola sbiancante, come mostrato nella figura. La parte sbiancante è rivolta VERSO L'ALTO



Posizionare la pellicola al centro dell'arcata e schiacciare sui denti fino al bordo gengivale.

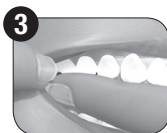

Sollevare la guancia per fare aderire perfettamente la pellicola ai denti posteriori.



Ripiegare la pellicola e schiacciare contro la parte interna del dente.



**Indossare per
1-2 ore**



Rimuovere la pellicola sollevandola da un angolo.



Lavare e risciacquare accuratamente.

Note legali: Garrison Dental Solutions ritiene che tali informazioni siano accurate e fornite solo a beneficio dei propri clienti per l'uso del prodotto secondo la prescrizione. Il presente documento non è da considerarsi una garanzia o una garanzia di prestazioni del prodotto, e Garrison Dental Solutions non è legalmente vincolata a tali azioni basate su questo documento.

Descrição

As fitas de clareamento Daring White™ são o sistema de clareamento mais confortável e amigável para pacientes. Estas fitas são projetadas para aderir aos dentes durante 1 a 2 horas para aproveitar a composição proprietária de peróxido de carbamida.

ATENÇÃO POR FAVOR: pode ser feita a remoção antes de 30 minutos, mas é mais difícil, pode rasgar e sair aos pedaços.

Contraindicações

- Não fume durante o tratamento de clareamento.
- Evite o contato com os olhos. Se ocorrer o contato, lave com água abundante.
- Evite o contato direto da superfície ativa da fita com a gengiva e/ou o fluxo salivar.
- Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou em durante a amamentação.
- Não deve ser utilizado por menores de 18 anos.
- Evite o contato com as roupas.
- Não engula a fita.
- Se ocorrer irritação (tais como vermelhidão, inchaço, dor) das gengivas ou boca, interrompa a utilização e consulte um dentista.
- Se ranger os dentes, não use durante a noite.
- Não utilize se for alérgico aos peróxidos como peróxido de hidrogênio.
- O clareamento não afeta as facetas e coroas de porcelana, restaurações de acrílico coloridas ou a amálgama do dente.

Armazenamento & Manipulação

- Manter o produto refrigerado para manter o máximo de vida útil.
- Não armazenar acima dos 5°C. Não congele. Melhor usado antes da data na etiqueta.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada, ou se os selos estiverem quebrados ou abertos.
- Concentração inicial de 15% de peróxido de carbamida. A concentração pode mudar devido à natureza do peróxido e esta formulação única.

Prazo de validade: 36 meses



Atenção - Consulte as instruções de utilização e informação completa.



Oxidante - Evitar contato com substâncias reativas.




Temperatura de Armazenamento – Guarde o produto à temperatura indicada.




Vendido apenas aos dentistas




Apenas para uso único

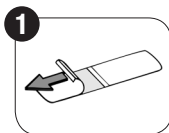

Remova o papel expondo o lado de clareador da fita do filme conforme o indicado.

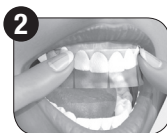


Centralize a fita e coloque a borda reta contra os dentes na linha das gengivas.

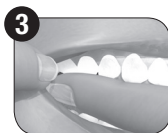

Afaste a bochecha e empurre a fita para os dentes de trás.



Dobre a borda entalhada a fita para a parte traseira dos dentes. Pressione firmemente em todas as superfícies.

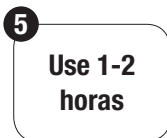

Para retirar, agarre um canto e puxe a fita da frente dos dentes, depois empurre a fita para longe da parte de trás dos dentes.



Escove ou enxague qualquer gel remanescente.

Isenção de responsabilidade: Garrison Dental Solutions acredita que esta informação seja precisa e é oferecido apenas para o benefício dos seus clientes para o uso do produto condições prescritas. Este documento não é considerado uma garantia ou garantia de desempenho do produto, e Garrison Dental Solutions não está legalmente vinculado a tais reivindicações baseadas neste documento.

Beschrijving

Daring White™ blekende folie is het meest comfortabele, gebruikersvriendelijke bleekbehandelingssysteem dat nu beschikbaar is. Deze stroken folie zijn gemaakt om 1 à 2 uur op de tanden te blijven plakken om zo de gepatenteerde carbamideperoxideformule optimaal te laten inwerken.

LET OP: De folie kan weliswaar al eerder worden verwijderd dan na 30 minuten, maar dit is moeilijker, aangezien de folie kan scheuren en dan alleen in kleine stukjes kan worden verwijderd.

Contra-indicaties

- Niet roken tijdens de bleekbehandeling.
- Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water.
- Vermijd contact met het actieve oppervlakte van de folie met tandvles en/of speeksel.
- Niet geschikt voor zwangere vrouwen of voor vrouwen die borstvoeding geven.
- Niet geschikt voor personen onder de 18.
- Vermijd contact met kleding.
- Slik de folie niet in.
- Zet de behandeling stop als er irritatie (roodheid, zwelling of pijn) optreedt van het tandvles of de mondholt en raadpleeg een tandarts.
- Gebruik het product niet 's nachts als u last heeft van bruxisme (tandenknarsen/kaakklemmen).
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor, zoals waterstofperoxide.
- Bleekbehandelingen hebben geen invloed op porseleinen kronen en schildjes, tandkleurige restauraties van acrylaat of amalgaamvullingen.

Bewaren en hantering

- Bewaar het product gekoeld voor maximale houdbaarheid.
- Niet bewaren boven de 5°C. Niet invriezen. Te gebruiken voor de afgedrukte houdbaarheidsdatum.
- Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is of de verzegeling verbroken of geopend blijkt te zijn.
- 15% initiële concentratie carbamideperoxide.
De concentratie kan veranderen door het soort peroxide en de unieke samenstelling ervan.

Houdbaarheid: 36 maanden



Let op - Raadpleeg
gebruiksaanwijzing
voor meer informatie.



Oxiderende stof -
Vermijd contact met
andere reactieve stoffen.



Bewaartemperatuur - Product
bij de aangegeven temperatuur
bewaren.




Mag uitsluitend aan tandartsen
verkocht worden.



Voor eenmalig gebruik.

1

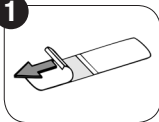


De blekende kant van
de folie is naar **BOVEN**
gericht. De blekende kant
van de folie is naar boven
gericht. Haal de folie uit de
verpakking zoals afgebeeld.

2



Centreer de folie en plak
hem op de tanden, op de
grens met het tandvlees.

3

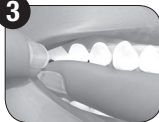

Trek de wang weg en
duw de folie tegen de
kiezen.

4



Duw hem over het gehele
oppervlak stevig aan.

5

**Draagtijd:
1 à 2 uur**

6



Verwijder de folie door
een hoek vast te pakken
en los te trekken van de
voortanden. Schuif de folie
vervolgens van de achter-
kant van de tanden.

7



Poets of spoel eventuele
overgebleven gel weg. Spoel
de gel weg in de wastafel.

Vrijwaring: Garrison Dental Solutions is van mening
dat deze informatie juist is de informatie dient
uitsluitend om klanten te helpen om het product te
gebruiken volgens de bovengenoemde voorwaarden.
Dit document geldt niet als productgarantie en
Garrison Dental Solutions is niet wettelijk
aansprakelijk voor claims op grond van dit grond.