

Fusion™ Anterior Matrix System

User instructions

- EN** For an online version of these instructions for use, scan the QR code on this page.
- DE** Für eine Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache scannen Sie den QR-Code auf dieser Seite.
- ES** Para obtener instrucciones de uso en español, escanee el código QR en esta página.
- PT** Para obter instruções de uso em português, leia o código QR nesta página.
- IT** Per le istruzioni d'uso in Italiano, scannerizzare il codice QR di questa pagina.
- FR** Pour le mode d'emploi en français, scannez le QR code sur cette page.
- NL** Scan de QR-code op deze pagina voor een gebruiksaanwijzing in het Nederlands.
- DK** For brugsanvisning på Dansk, scan QR-koden på denne side.
- SE** För instruktioner på svenska, skanna QR-koden på denna sida.
- NO** Skann QR-koden på denne siden for å se bruksanvisningen på norsk.
- FI** Suomenkieliset käyttöohjeet löydät skannaamalla tämän sivun QR-koodia
- PL** Aby zobaczyć instrukcję w języku Polskim, zeskanuj kod QR



<https://www.parsiondental.com/esh/antbor1>

FILE NAME: 1842r0121 Anterior System IFU.indd

DOC #: 1842r0121

REV #: B

DESCRIPTION: Anterior System IFU

LANGUAGES: English, German, Spanish, Portuguese, Italian, French, Dutch, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Polish

FILE TYPE: Adobe InDesign 2021

PREPARED BY: JLM

SCALE: 100%

INK: CMYK

PAPER STOCK: 70# matte text, White, cutting,

NOTES: page size 4" x 2.50" finished, Bleed none.


The copy below is what is translated on the cover all languages except English:

For instructions for use in _____, scan the QR code on this page.


Fusion™ Anterior Matrix System *User instructions.*

The Fusion™ Anterior Matrix System is designed to restore the following teeth:

1. **Select a matrix band** that most closely approximates the height of the tooth to be restored. As it is often desirable to insert the band slightly into the sulcus, be sure to account for this when selecting the matrix.
2. **The tapered matrix** may be inserted with the widest end towards the largest area to be restored. For instance, it may be advantageous to have the wider portion of the matrix towards the incisal edge when restoring a Class IV with significant incisal involvement. Conversely, placing the matrix with the widest end towards the gingiva when restoring a large Class III would be recommended.
3. **Hold the matrix firmly in place during wedging.** A finger placed on the incisal edge of the band with apical pressure will help prevent the band from becoming dislodged when inserting the wedge.

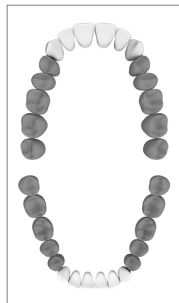

4. **The Fusion Anterior Wedge may be placed either from the facial or lingual.** It is recommended that it be placed from the side that will best support the matrix band for the type of lesion being restored.
5. **The wedge should be placed** with the cervical interface towards the matrix band so that the curve of the wedge follows the matrix around the tooth. This will ensure maximum matrix adaptation.
6. **Use the smallest wedge that provides adequate tooth separation** to ensure proper interproximal contact. 'Over-wedging' with a wedge that is larger than needed will increase the likelihood of creating a black triangle.

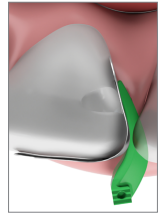

Sterilization prior to use is recommended.

For sterilization instructions go to: garrisonsdental.com/sterilization

- EN** Scan the QR code on this page, for a quick start video on how to get the best results from your Fusion™ Anterior System.
- DE** Scannen Sie den QR-Code auf dieser Seite, um ein Einführungsvideo zu erhalten, das Ihnen zeigt, wie Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Fusion™ Frontzahnmatrizensystem erzielen.
- ES** Escanee el código QR en esta página para obtener un video de inicio rápido sobre cómo obtener los mejores resultados de su sistema Fusion™ Anterior.
- PT** Faz o scan do código QR nesta página, para um rápido vídeo introdutório da melhor maneira em como obter os melhores resultados do seu Fusion™ Anterior System.
- IT** Scannerizzare il codice QR di questa pagina per un breve video su come ottenere i migliori risultati dal vostro sistema Fusion™ Anterior
- FR** Scannez le QR code sur cette page, pour obtenir une vidéo sur la façon d'obtenir les meilleurs résultats de votre système Fusion™ Anterior.
- NL** Scan de QR-code op deze pagina voor een SnelStart video over hoe u de beste resultaten met uw Fusion™ Anterior Systeem kunt bereiken.
- DK** (DANISH / DANSK)
- SE** Scanna QR-koden för att nå vår introduktionsvideo som hjälper dig att åstadkomma de bästa resultaten med Fusion Anterior System.
- NO** Skann QR-koden på denne siden for en rask startvideo om hvordan du får de beste resultatene fra Fusion™ Anterior System.
- FI** Skannaa täällä sivulla oleva QR-koodi, niin saat pikakäynnistysvideon siitä, miten saat Fusion™ Anterior System -järjestelmästäsi parhaan tuloksen.
- PL** Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć krótki film przedstawiający, jak uzyskać najlepsze rezultaty używając formówek Fusion™ Anterior.

Garrison

Company Headquarters

150 DeWitt Lane, Spring Lake, Michigan 49456 USA
Toll-Free (US and Canada): 888.437.0032
T 616.842.2244 F 616.842.2430
gds@garrissondental.com garrissondental.com

European Office

Carlstrasse 50
D-52531 Uebach-Palenberg, Germany
T 49.(0)2451.971.409 F 49.(0)2451.971.410
info@garrissondental.net garrissondental.com



<https://youtube.com/watch?v=PtU7B1w0yN8&list=PLoFmRg2>

1842/0121 Rev. C