



KATALOG 2021 PL

Garrison

Dental Solutions

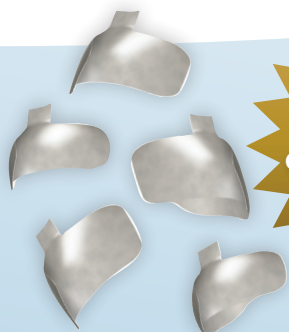

2020
paski firm band
COMPOSI-TIGHT®
3D FUSION™

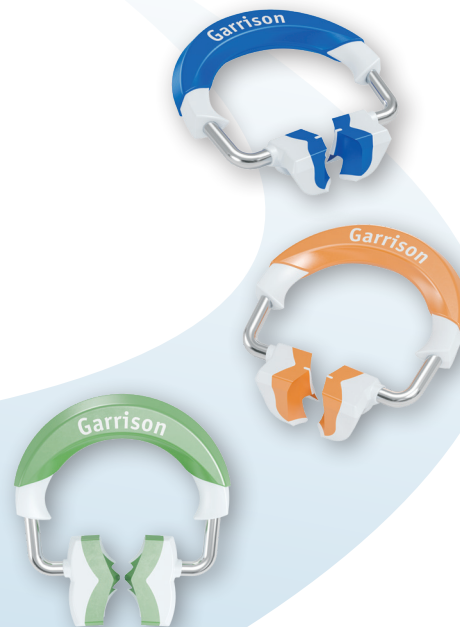

Spis treści

SYSTEM FORMÓWEK SEKCYJNYCH

System Formówek Sekcyjnych	Composi-Tight® 3D Fusion™	3-9
	Inne systemy formówek sekcyjnych	10-11

Formówki typu Tofflemore	Slick Bands™	14
--------------------------	------------------------	----

Paski	VariStrip™	18
-------	----------------------	----

KLINY MIĘDZYŻĘBOWE

Plastikowe	Kliny Composi-Tight® 3D Fusion™	15
	WedgeWands® z aplikatorem	16
	Kliny A+Wedge® nasączone płynem Astrigent.	17

Drewniane	Kliny drewniane miękkie SoftWedge™.	17
-----------	---	----

WAŻNE AKCESORIA

Akcesoria do końcowego opracowania wypełnień	FitStrip™ System pasków do wykończenia i konturowania przestrzeni międzyzębowych	19-24
--	--	-------

Gumki do polerowania	Gumki do polerowania uzupełnień z tlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu eZr™	26-27
----------------------	---	-------

Kleszcze	Composi-Tight® 3D Fusion™ Kleszcze do pierścieni	28
	Kleszcze do pierścieni	28
	Kleszcze uniwersalne	28
	Kleszcze Composi-Tight® do formówek	29

Narzędzia	PerForm™ do przestrzeni międzyzębowych	25
-----------	--	----

Instrumenty kompozytowe	Antyadhezyjne narzędzia multifunkcyjne 5w1	30
	Narzędzia do kompozytów	31-32

WAŻNE INFORMACJE

Porównanie formówek.	12-13
Sterylizacja i czyszczenie	33



Przypadek kliniczny

“Rozległe ubytki próchnicowe pomiędzy zębami trzonowymi następująca wielu trudności w leczeniu. Sama diagnostyka jest stosunkowo prosta przy ubytku o dużym stopniu zaawansowania, podobnie jak jego odpowiednie opracowanie. Problem pojawia się przy wypełnieniu, kiedy konieczne jest założenie kształtki międzyzębowej. Idealnie założona kształtka powinna ściśle przylegać do brzegu dodziąsłowego ubytku w celu zapewnienia szczelności, jak również odtwarzać fizjologiczny punkt stykowy pomiędzy zębami. Tymczasem anatomia korony zęba powoduje, iż w przypadku rozległych ubytków osiągnięcie obu celów jest niezwykle trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe. Warunkiem powodzenia takiego leczenia jest zastosowanie odpowiednio elastycznej kształtki międzyzębowej i odpowiedniego systemu pierścieni zaciskowych, które pozwolą na utrzymanie kształtki w żądanej formie wokół granic ubytku. W poniższym przypadku klinicznym wykorzystano system Composi-Tight® 3D Fusion™ firmy Garrison.,,

dr n. med. Maciej Mikołajczyk



RYC 1 Pacjent zgłosił się do gabinetu skarżąc się na ból przy jedzeniu, występujący po lewej stronie w obrębie dolnych zębów trzonowych. Przyczyna była dość oczywista – rozległy i głęboki ubytek powierzchni mezialnej zęba, gdzie podminowanie szkliwa doprowadziło do jego pęknięcia i odsłonięcia zaatakowanej przez próchnicę zębiny.



RYC 2 Założono koferdam i opracowano ubytek, co przesunęło bliżej dziąsła granicę ubytku. W trakcie preparacji stwierdzono obecność ubytku poniżej punktu stykowego na zębie sąsiednim.



RYC 3 Zaaplikowano kształtkę dedykowaną do zębów trzonowych systemu Composi-Tight o zwiększonej elastyczności, aby móc precyzyjnie ukształtować punkt stykowy i krawędź dodziąsłową.



RYC 4 Wykorzystano elastyczny pierścień zaciskowy z silikonowymi końcówkami. Końcówki wykonane w tej technologii dopasowują się do kształtu każdego zęba, powodując ściśle przyleganie kształtki do wszystkich krawędzi ubytku i zapobiegają jej przemieszczaniu się. Dodatkowo są specjalnie ukształtowane w strefie przydziąsłowej w taki sposób, aby było możliwe wsunięcie klina międzyzębowego po założeniu pierścienia zaciskowego, a nie przed (co znakomicie stabilizuje kształtkę i zapobiega jej przesuwaniu przy aplikacji klina).



RYC 5 Po założeniu pierścienia i dostosowaniu punktu stykowego między zęby wprowadzono klin, który spowodował doszczelnienie dodziąsłowej krawędzi ubytku i umożliwił uzyskanie prawidłowej adhezji w tym rejonie.



RYC 6 Przy wypełnianiu ubytku zastosowano technikę total etch i aplikację systemu łączącego OptiBond FL. Sam ubytek wypełniono materiałem SonicFill (Kerr) aktywowanym drganiem o częstotliwości dźwięku. Jest to materiał typu bulk fill, który pozwala na jednoczesowe wypełnienie całego ubytku, przy minimalizowaniu skurczu polimerizacyjnego materiału.





RYC 7 Ubytek został wypełniony prawidłowo z zachowaniem odpowiedniego punktu stykowego między zębami, co znakomicie ułatwi planowanie dalszego leczenia w tym rejonie jamy ustnej u pacjenta.

Dlaczego powinniśmy używać systemu formówek sekcyjnych?

System typu Tofflemire

- ❌ Źle odbudowana anatomia punktu stykowego
- ❌ Mały punkt stykowy na wysokości konturu
- ❌ Zwiększone prawdopodobieństwo złamania, interferencja zgryzowa
- ❌ Pułapki na jedzenie, nawracająca próchnica i choroby przyzębia

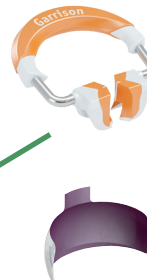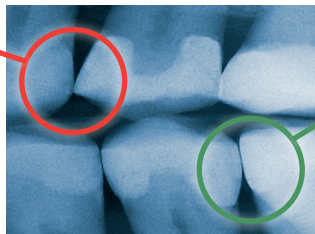

System formówek sekcyjnych Composi-Tight® 3D Fusion™

- ✓ Jeden system dla wszystkich ubytków klasy II
- ✓ Teraz dostępny również do dużych ubytków
- ✓ Punkt stykowy na wysokości konturu
- ✓ Szybki i łatwy w użyciu system
- ✓ Paski o anatomicznym kształcie
- ✓ Pierścienie pozwalają na optymalną separację zębów
- ✓ Anatomiczny punkt stykowy


Tylko Composi-Tight® 3D Fusion™ zapewnia anatomiczne punkty stykowe



- 1 Umieść matrycę przy pomocy kleszczy firmy Garrison. Wskazówka: kiedy zęby są mocno stłoczone i paska nie da się włożyć, użyj niebieskiego pierścienia aby rozklinować zęby (załóż go na 20 sekund).



- 2 Umieść klin Composi-Tight® 3D Fusion™ pęsetą, aby uszczelić pasek przy dziąśle.

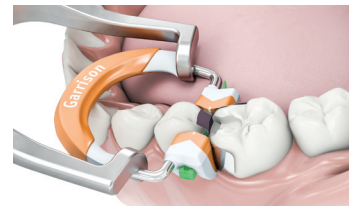

- 3 Umieść pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ za pomocą kleszczy do pierścieni (zobacz zdjęcie).



„Rekonstrukcja ścian stycznych zębów bocznych to wieloetapowy proces, który wymaga precyzyjnych narzędzi. Zestaw matryc, klinów oraz pierścieni Garrison pozwala mi na uzyskanie najwyższej jakości szczelności brzeżnej, prawidłowego profilu wylania oraz precyzyjnego punktu stykowego w bezpośrednich odbudowach kompozytowych.”

Lek. dent. Dominik
Ślusarczyk, Katowice,
Poland

Przypadek kliniczny



RYC 1 Izolacja pola zabiegowego koferdamem.



RYC 2 Wstępne opracowanie ubytków próchnicowych.



RYC 3 Ostateczne opracowanie ubytków próchnicowych.



RYC 4 Dopasowanie klina X-small w przestrzeni międzyzębowej.



RYC 5 Dopasowanie dwóch matryc FXH100.



RYC 6 Założenie pierścienia Composi-Tight® 3D Fusion™.



RYC 7 Bezpośrednia odbudowa kompozytowa zęba 25.



RYC 8 Wypolerowanie odbudowy kompozytowej.

Composi-Tight® 3D Fusion™

Sectional Matrix System



Nowy, zielony pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji

Jest idealny do szerokich nisz międzyczębowych, zachowuje formę nawet w przypadku braku guzka zęba. Szerokie końcówki silikonowe zapobiegają wgnieceniu formówki do ubytku FX600



Pomarańczowy pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ - teraz z końcówkami retencyjnymi

Końcówki retencyjne Ultra-Grip™ zapobiegają ześlizgiwaniu się wszystkich pierścieni Composi-Tight® 3D Fusion™. Ulepszony kształt powoduje, iż otwieranie i umieszczanie pierścienia na zębach jest jeszcze prostsze. Bardzo dobrze trzyma się również na dużych zębach trzonowych FX500



Popularny, niebieski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ który można teraz jeszcze łatwiej otworzyć

Nowy pierścień zapewnia lepsze dopasowanie do anatomicznej wypukłości zęba dzięki miękkim, silikonowym końcówkom. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku zębów krótkich oraz źle ustawionych, dobrze trzyma się nad kłami do koferdamu lub pomiędzy zębami przedtrzonowymi i kłami FX400



Produkt	Opis	Cena
FX600	Pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 2 sztuki/opak.	944 zł
FX600-1	Pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 1 sztuka/opak.	492 zł
FX500	Wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy, 2 sztuki/opak.	944 zł
FX500-1	Wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy, 1 sztuka/opak.	492 zł
FX400	Niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski, 2 sztuki/opak.	944 zł
FX400-1	Niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski, 1 sztuka/opak.	492 zł
FXR01	Zestaw 3 pierścieni (1x zielony, 1x pomarańczowy, 1x niebieski)	1 383 zł
FXP01	Kleszcze do mocowania pierścieni Composi-Tight® 3D Fusion™	406 zł

Composi-Tight® 3D Fusion™

Sectional Matrix System

Nowości w naszych pierścieniach:


Długa żywotność
dzięki nowej
metodzie produkcji.

Końcówki
retencyjne
Ultra-Grip™
zapobiegają
ześlizgiwaniu się
pierścieni.

Sztywny
plastik
oddziela
zęby.

Miękkie silikonowe
końcówki Soft-Face™
z udoskonaloną
krawędzią brzeżną
idealnie dopasowują
formówkę do zęba.

Pierwszy pierścień z
bardzo dużą silikonową
końcówką do
rozległych preparacji.

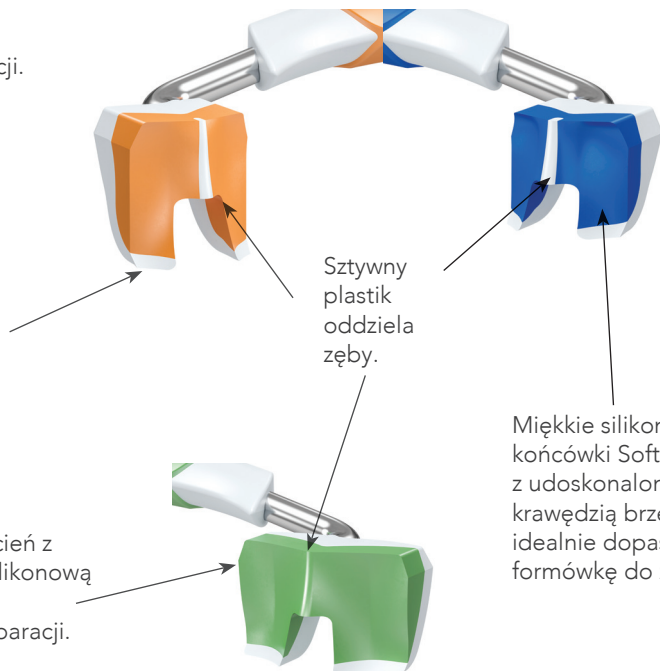

Dental Advisor - Najlepszy system formówek sekcyjnych wg redakcji w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. Dental Advisor ponownie wybrał system formówek sekcyjnych Composi-Tight® 3D Fusion™ jako najlepszy system formówek sekcyjnych w roku 2020.



System formówek sekcyjnych Composi-Tight® 3D Fusion™ wygrywa ósmy raz z rzędu nagrodę Dental Advisor za najlepszy system formówek sekcyjnych

Composi-Tight® 3D Fusion™

Firm Matrix Bands



Nowe, sztywniejsze paski Composi-Tight® 3D Fusion™ są odporne na odkształcenie prawie o 70% bardziej niż konkurencyjne formówki, a przy tym są super cienkie - tylko 0,038 mm.

Produkt	Opis	Cena
FX-HHF-00 Kit intro	1x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski, 1x wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy, 1x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 80x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach, 70x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands w 5 rozmiarach, 1x kleszcze do osadzania pierścieni	2 212 zł
FX-HHF-40	1x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski, 1x wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy, 1x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 40x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach, 40x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands w 5 rozmiarach, 1x kleszcze do osadzania pierścieni	1 970 zł

Technologia eZ-Place™

NOWOŚĆ!

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrix Bands

	Przedtrzonowce	Przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową	Przedtrzonowce i małe trzonowce	Trzonowce	Trzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową
Paski Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm z technologią eZ-Place™ dla łatwiejszego zakładania.					
Grubość 0,038 mm					
Nr kat.	FXH100	FXH150	FXH175	FXH200	FXH300
Wysokość	4,3 mm	5,9 mm	5,3 mm	6,1 mm	7,7 mm
Ilość w opak.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.
Cena	549 zł	549 zł	549 zł	549 zł	549 zł
Nr kat.	FXH100-M	FXH150-M	FXH175-M	FXH200-M	FXH300-M
Wysokość	4,3 mm	5,9 mm	5,3 mm	6,1 mm	7,7 mm
Ilość w opak.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Cena	303 zł	303 zł	303 zł	303 zł	303 zł



Zestaw pasków: 5 rozmiarów, 300 szt.

FXHB04

Cena 1 428 zł

Zestaw pasków: 5 rozmiarów, 150 szt.

FXHB05

Cena 747 zł

Nowe paski **Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands** z technologią **eZ Place™** zachowują swój kształt podczas zakładania dzięki czemu jest to łatwiejsze!

Fusion Firm Bands:

- 70% bardziej odporne na deformację
- Super cienkie - tylko 0,038 mm
- 5 rozmiarów

Idealne do:

- Ciasnych punktów stykowych
- Dużej ilości wypełnień
- Nowych jak i obecnych klientów

Composi-Tight® 3D Fusion™

Sectional Matrix System



FX-KFF-00



Nowy System Formówek Sekcyjnych Composi-Tight® 3D Fusion™ zapewnia skuteczne rozwiązanie dla wszystkich ubytków klasy II.

Miękkie silikonowe końcówki Soft-Face™ z udoskonaloną krawędzią brzeżną idealnie dopasowują formówkę do zęba, gwarantując doskonały punkt styczny oraz uniknięcie nadmiaru wypełnienia przy odbudowie zęba.

Produkt	Opis	Cena
FX-KFF-00	1x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski,	2 253 zł
Zestaw startowy	1x wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy, 1x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 80x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach, 70x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ w 5 rozmiarach, 1x kleszcze do osadzania pierścieni	
FX-KFF-50	1 x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski, 1 x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 40 x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach, 40 x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ w 5 rozmiarach, 1 x kleszcze do osadzania pierścieni	1 580 zł

Composi-Tight® 3D Fusion™

Full Curve Non-Stick Matrices

Pasują do
każdego
kształtu zęba!

	przedtrzonowce	przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową	przedtrzonowce i małe trzonowce	trzonowce	trzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową
Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™					
Grubość 0,038 mm					
Nr kat.	FX100-M	FX150-M	FX175-M	FX200-M	FX300-M
Wysokość	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm
Ilość w opak.	50 szt.	30 szt.	50 szt.	50 szt.	30 szt.
Cena	316 zł	316 zł	316 zł	316 zł	316 zł
Nr kat.	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
Wysokość	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm
Ilość w opak.	100 szt.	60 szt.	100 szt.	100 szt.	60 szt.
Cena	570 zł	570 zł	570 zł	570 zł	570 zł


Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™



Kompletny zestaw formówek
we wszystkich rozmiarach
- 210 formówek

FXB02

Cena 1 333 zł

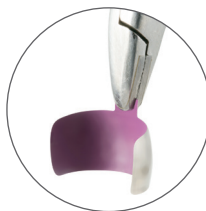

Dokładne owinięcie – formówki Full Curve owijają się dalej dookoła zęba, co ułatwia zamocowanie pierścienia.

Większa kontrola – specjalny uchwyt Grab Tab™ w części okluzyjnej daje doskonałą kontrolę niezależnie od rodzaju wybranego narzędzia do mocowania.

Lepsze dopasowanie – ulepszone podziałkowe rozszerzenie oraz zwiększona długość zapewniają uzyskanie lepszych rezultatów przy bardziej wymagających odbudowach.

Proste mocowanie – zaawansowany zakrzywiony kształt formówek poprawia ich strukturalną sztywność, co czyni je najłatwiejszymi w użyciu ze wszystkich naszych formówek.

Proste zdejmowanie – formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve nie byłyby kompletne bez stworzonej przez firmę Garrison antyadhezyjnej powłoki Slick Bands™

Produkt	Opis	Cena
FXB01	Zestaw formówek Composi-Tight® 3D Fusion™ - asortyment 420 sztuk (po 100 szt. z rozmiarów: FX100, FX175, FX200 oraz po 60 szt. w rozmiarach FX150 i FX300)	2 524 zł
BFA-1	Kleszcze do formówek	636 zł

Composi-TightGold®

Druga generacja systemu Composi-Tight®, dalej uwielbiana przez wielu stomatologów



Pierścienie G-Rings™

		Cena
AU400	G-Rings™ z wypustkami standardowej długości 3 szt.	402 zł
AU500	G-Rings™ z wypustkami o wydłużonej długości 3 szt.	402 zł
AUMRDF-100	Kleszcze do zakładania pierścieni 1 szt.	340 zł

	dziecięce	przedtrzonowce	przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszykową	trzonowce	trzonowce z głęboką preparacją przyszykową
Composi-Tight Gold® 0.035 mm grubość					
Nr kat.	AU050-M	AU100-M	AU150-M	AU200-M	AU300-M
Wysokość	3,2 mm	4,6 mm	3,8 mm	6,4 mm	6,4 mm
Ilość w opak.	25 szt.	50 szt.	25 szt.	50 szt.	25 szt.
Cena	205 zł	205 zł	205 zł	205 zł	205 zł
Nr kat.	AU050	AU100	AU150	AU200	AU300
Wysokość	3,2 mm	4,6 mm	3,8 mm	6,4 mm	6,4 mm
Ilość w opak.	50 szt.	100 szt.	50 szt.	100 szt.	50 szt.
Cena	377 zł	377 zł	377 zł	377 zł	377 zł

Composi-Tight®

Nasz pierwszy system, który wyznaczył standardy dla ciasnych anatomicznych punktów styčných.




G-Rings™

		Cena
G100	Pierścień G-Ring™ standardowy 3/szt.	361 zł
G200	Pierścień G-Ring™ do wysokich zębów 3/szt.	361 zł
AUMRDF-100	Kleszcze do mocowania pierścieni 1 szt.	340 zł

	dziecięce	przedtrzonowce	przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszykową	trzonowce	trzonowce z głęboką preparacją przyszykową
Composi-Tight® 0.035 mm grubość					
Nr kat.	B050-M	B100-M	B150-M	B200-M	B300-M
Wysokość	3,2 mm	4,6 mm	3,8 mm	6,4 mm	6,4 mm
Ilość w opak.	25 szt.	50 szt.	25 szt.	50 szt.	25 szt.
Cena	176 zł	176 zł	176 zł	176 zł	176 zł
Nr kat.	B050	B100	B150	B200	B300
Wysokość	3,2 mm	4,6 mm	3,8 mm	6,4 mm	6,4 mm
Ilość w opak.	50 szt.	100 szt.	50 szt.	100 szt.	50 szt.
Cena	324 zł	324 zł	324 zł	324 zł	324 zł

Composi-Tight® 3D XR

Przejdź na wyższy poziom z pierścieniami, które nie „zeskoczą”!

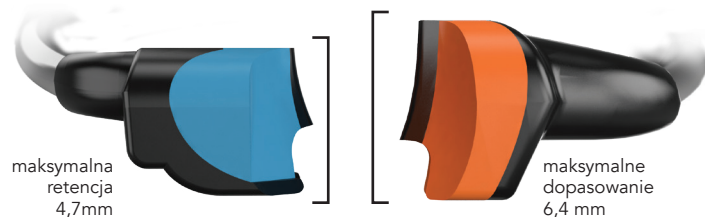

Pierścień do matryc sekcyjnych Composi-Tight® 3D XR Soft-Face™ jest ultra retencyjnym pierścieniem stworzonym do pracy z krótkimi lub nieprawidłowo ukształtowanymi zębami, oraz w przestrzeni między kłami a pierwszymi przedtrzonowcami.

Pomarańczowy pierścień z miękką końcówką Soft-Face™ zapewnia wyjątkową łatwość umieszczania oraz maksymalną adaptację dla szerokiego spektrum budowy zęba, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiaru wypełnienia. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zawsze używaj koferdamu oraz naszych kleszczy do mocowania pierścieni!





Produkt	Opis	Ilość	Cena
3D500	Pierścienie 3D Soft-Face™ (pomarańczowe)	2/szt.	919 zł
3DXR	Ekstra retencyjne pierścienie Soft-Face™ (niebieskie)	2/szt.	939 zł

Seria FXH

	Dziecięce	Przedtrzonowce	Przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową	Przedtrzonowce i małe trzonowce	Trzonowce	Trzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową
	Paski Composit-Tight® 3D Fusion™ Firm z technologią eZ-Place™ dla łatwiejszego zakładania.					
Grubość 0.038 mm						
Wysokość	NA	FXH100 4,3 mm	FXH150 5,9 mm	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 7,7 mm

Nr kat.	Opakowanie małe (-M)		Opakowanie duże	
	Ilość	Cena	Ilość	Cena
FXH100	50	303 zł	100	549 zł
FXH150	50	303 zł	100	549 zł
FXH175	50	303 zł	100	549 zł
FXH200	50	303 zł	100	549 zł
FXH300	50	303 zł	100	549 zł

Seria FX

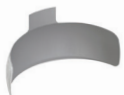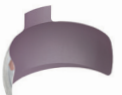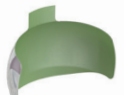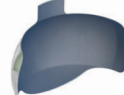	Formówki Composit-Tight® 3D Fusion™					
Grubość 0.038 mm						
Wysokość	NA	FX100 4,4 mm	FX150 6,0 mm	FX175 5,6 mm	FX200 6,6 mm	FX300 8,7 mm

Nr kat.	Opakowanie małe (-M)		Opakowanie duże	
	Ilość	Cena	Ilość	Cena
FX100	50	316 zł	100	570 zł
FX150	30	316 zł	60	570 zł
FX175	50	316 zł	100	570 zł
FX200	50	316 zł	100	570 zł
FX300	30	316 zł	60	570 zł

Seria SXR

	Formówki Slick-Band™ XR posiadają antyadhezyjną powłokę oraz uchwyty Grab-Tabs™ dla łatwiejszego zakładania					
Grubość 0.038 mm						
Wysokość	NA	SXR100 4,6 mm	SXR150 5,4 mm	SXR175 5,4 mm	SXR200 6,4 mm	SXR300 8,6 mm

Nr kat.	Opakowanie małe (-M)		Opakowanie duże	
	Ilość	Cena	Ilość	Cena
SXR100	50	287 zł	100	521 zł
SXR150	30	287 zł	60	521 zł
SXR175	50	287 zł	100	521 zł
SXR200	50	287 zł	100	521 zł
SXR300	30	287 zł	60	521 zł

Seria MC

	Matryce Composit-Tight® 3D Clear					
Grubość 0.05 mm						
Wysokość	NA	MC100 5,0 mm	NA	MC175 5,9 mm	MC200 6,8 mm	NA

Nr kat.	Opakowanie małe (-M)		Opakowanie duże	
	Ilość	Cena	Ilość	Cena
MC100	50	287 zł	100	521 zł
MC175	50	287 zł	100	521 zł
MC200	50	287 zł	100	521 zł

Seria M

	Dziecięce	Przedtrzonowce	Przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową	Przedtrzonowce i małe trzonowce	Trzonowce	Trzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową
Composi-Tight®	Formówki Composi-Tight® 3D są konturowane w 3 wymiarach					
Grubość 0.035 mm						
Wysokość	M050 3,2 mm	M100 4,6 mm	M150 3,8 mm (5,4 mm)	M175 5,4 mm	M200 6,4 mm	M300 6,4 mm (8,6 mm)

Nr kat.	Opakowanie małe (-M)		Opakowanie duże	
	Ilość	Cena	Ilość	Cena
M050	25	205 zł	50	377 zł
M100	50	205 zł	100	377 zł
M150	25	205 zł	50	377 zł
M175	50	205 zł	100	377 zł
M200	50	205 zł	100	377 zł
M300	25	205 zł	50	377 zł

Seria AU

	Dziecięce	Przedtrzonowce	Przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową	Przedtrzonowce i małe trzonowce	Trzonowce	Trzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową
Composi-Tight Gold®	Formówki Composi-Tight Gold®					
Grubość 0.035 mm				NA		
Wysokość	AU050 3,2 mm	AU100 4,6 mm	AU150 3,8 mm (5,4 mm)	NA	AU200 6,4 mm	AU300 6,4 mm (8,6 mm)

Nr kat.	Opakowanie małe (-M)		Opakowanie duże	
	Ilość	Cena	Ilość	Cena
AU050	25	205 zł	50	377 zł
AU100	50	205 zł	100	377 zł
AU150	25	205 zł	50	377 zł
AU200	50	205 zł	100	377 zł
AU300	25	205 zł	50	377 zł

Seria B

	Dziecięce	Przedtrzonowce	Przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową	Przedtrzonowce i małe trzonowce	Trzonowce	Trzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową
Composi-Tight® Original	Formówki Composi-Tight® Original					
Grubość 0.035 mm				NA		
Wysokość	B050 3,2 mm	B100 4,6 mm	B150 3,8 mm (5,4 mm)	NA	B200 6,4 mm	B300 6,4 mm (8,6 mm)

Nr kat.	Opakowanie małe (-M)		Opakowanie duże	
	Ilość	Cena	Ilość	Cena
B050	25	176 zł	50	324 zł
B100	50	176 zł	100	324 zł
B150	25	176 zł	50	324 zł
B200	50	176 zł	100	324 zł
B300	25	176 zł	50	324 zł

SlickBands™

Tofflemire-style


Antyadhezyjna technologia opracowana przez Garrison: Nowoczesne systemy wiążące mogą przylegać do niepowlekanych pasków - Slick Bands™ mają powłokę antyadhezyjną.




Zwiększona krzywizna nowego paska Right-Curve™ zapewnia nierównane uszczelnienie przydziąsłowe oraz łatwiej sięga sąsiadujących zębów pozwalając na opracowanie szerszego oraz głębszego punktu stykowego. Dzięki temu, po nałożeniu na ząb powstaje znacznie lepszy stożek w kształcie komina. Jest to dobry wybór dla wielu rodzajów odbudowy zęba.



Pasek poddziąsłowy zapewnia najlepsze dopasowanie przydziąsłowe oraz odpowiedni kształt przy głębokich ubytkach przyszyjkowych. Wysokość części poddziąsłowej paska została ograniczona, aby zapewnić lepsze dopasowanie przy głębokich ubytkach przyszyjkowych.

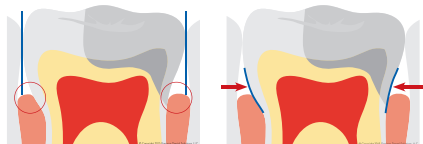

Lepsze uszczelnienie przydziąsłowe jest korzystne w przypadku każdego rodzaju odbudowy.

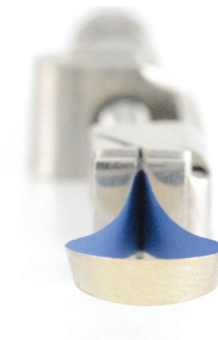

Slick Bands™

Nr produktu	Opis	Ilość	Cena
SMT400D10-M	Right-Curve™ zielone	50/szt.	213 zł
SMT400H10-M	Right-Curve™ szare	50/szt.	201 zł
SMT500H10-M	pedodontyczne	50/szt.	234 zł
SMT500S01	pedodontyczne (SMT500H10)	20/szt.	127 zł

Łącząc adaptacyjne materiały Soft-Face™ sztywny rdzeń wewnętrzny oraz zaawansowane właściwości mechaniczne, stworzono klin, który naprawdę działa. Za każdym razem.



FXK4-M


Pewny chwyt.

Uniwersalny uchwyt zapewnia absolutną kontrolę podczas zakładania klina niezależnie od tego, czy stosujesz kleszcze chirurgiczne czy też pęsetę do waty. Korzystaj z dowolnych narzędzi - Composi-Tight® 3D Fusion™ będzie cię wspierać.

Bez bólu – same plusy.

Wzniesiony, przypominający narty wierzchołek klina oraz łagodny promień krawędzi zapewniają płynne przesuwanie się klina nad płatem koferdamu lub brodawką dziąsłową oraz bezbolesną aplikację.

Composi-Tight®
3D Fusion™
Ultra Adaptive Wedges

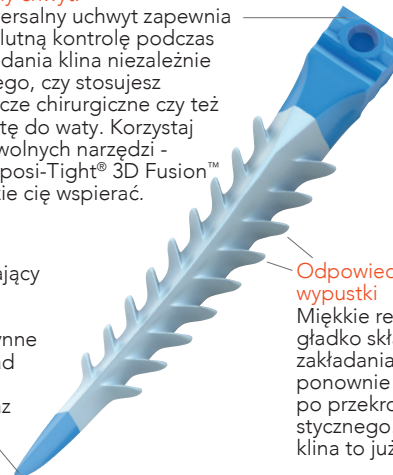

Odpowiednio wyprofilowane wypustki

Miękkie retencyjne wypustki gładko składają się podczas zakładania klina, aby ponownie otworzyć się po przekroczeniu punktu styku. Wysuwanie się klina to już przeszłość.

Kliny Composi-Tight® 3D Fusion™

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
FXK4-M	Zestaw klinów Composi-Tight® 3D Fusion™ - 50 sztuk każdego koloru	200 sztuk	447 zł
FXK4	Zestaw klinów Composi-Tight® 3D Fusion™ - 100 sztuk każdego koloru	400 sztuk	849 zł

Uzupełnienie

FXYL-M kliny X –Small, żółte	50 szt.	127 zł
FXBL-M kliny Small, niebieskie	50 szt.	127 zł
FXOR-M kliny Medium, pomarańczowe.	50 szt.	127 zł
FXGR-M kliny Large, zielone	50 szt.	127 zł

Twardy rdzeń.


Sztywny szkielet wewnętrzny pozwala na łatwe wprowadzanie klina oraz separację zębów, podobnie jak w przypadku tradycyjnych klinów.



Naprawdę miękki.

Miękkie tworzywo Soft-Face™ pokrywające kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ pozwala mu dokonać tego, czego żaden inny klin nie potrafi - właściwie dostosować się do nieregularnych kształtów przestrzeni międzyzębowej.

WedgeWands®

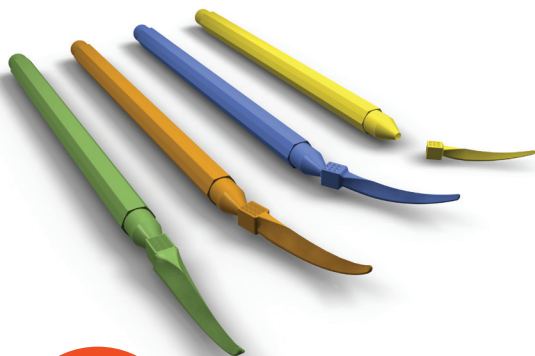


Matowe

Matowe kliny Wedge Wands®

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
WK4	Wedge Wands® asortyment po 100 w każdym rozmiarze	400/szt.	730 zł

Uzupełnienie


SWYL	kliny żółte X-Small	100/szt.	217 zł
SWBL	kliny niebieskie Small	100/szt.	217 zł
SWOR	kliny pomarańczowe Medium	100/szt.	217 zł
SWGR	kliny zielone Large	100/szt.	217 zł

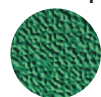

Pozostają na miejscu.

Cofanie się klinów zostało ograniczone dzięki teksturowanym powierzchniom oraz stopniowemu zwężaniu się boków.

Delikatny dotyk. Końcówka podobna do narty zapobiega wbijaniu się klina w koferdam lub brodawkę podczas zakładania, miękkie zaokrąglone brzegi ograniczają urazy podczas zakładania oraz usuwania klinów.

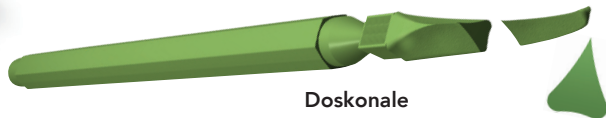

Doskonale dopasowane.

Kliny naturalnie dopasowują się do brzegów zębów dzięki sprężystemu plastikowemu materiałowi, z jakich są wykonane.

Pewne uszczelnienie. Każda strona oraz powierzchnia są jednolicie zaokrąglone dla dokładnego odwzorowania anatomicznego kształtu punktu styčnego.

CURE THROUGH
WedgeWands®

Przezroczyste



WCK4

Przezroczyste kliny Wedge Wands®

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
WCK4	Przezroczyste kliny Wedge Wands® po 100 w każdym rozmiarze.	400/szt.	730 zł

Uzupełnienie

SWCYL	kliny żółte X-Small	100/szt.	217 zł
SWCBL	kliny niebieskie Small	100/szt.	217 zł
SWCOR	kliny pomarańczowe Medium	100/szt.	217 zł
SWCGR	kliny zielone Large	100/szt.	217 zł

A+Wedge



GWAK4

Kliny A+ Wedge ograniczają krwawienie dziąseł


Dzięki czemu odbudowa zęba jest bardziej higieniczna oraz szybsza. Kliny dopasowują się do naturalnego konturu zęba, dokładnie odwzorowując anatomiczny kształt punktu stycznego. Są też dodatkowo pokryte warstwą siarczanu glinu który działa hemostatycznie na dziąsła. Kliny mają budowę zapobiegającą wysuwaniu się oraz są wystarczająco długie, aby zapewnić prawidłowe zakładanie pierścieni.

A+Wedge™

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
GWAK4	Zestaw A+ Wedge™ po 50 sztuk każdego rozmiaru	200/szt.	468 zł

Uzupełnienie

GWAYL	kliny żółte X-Small	100/szt.	242 zł
GWABL	kliny niebieskie Small	100/szt.	242 zł
GWAOR	kliny pomarańczowe Medium	100/szt.	242 zł
GWAGR	kliny zielone Large	100/szt.	242 zł

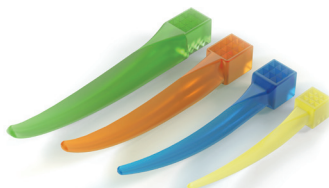

SoftWedge

Doskonałe dopasowanie
i uszczelnianie.



Pierwszy drewniany klin stworzony do pracy z systemem formówek sekcyjnych.

Kliny Soft Wege to drewniane kliny międzyzębowe, które zostały zoptymalizowane do pracy z nowoczesnymi materiałami wypełniającymi. Zdolność do skompresowania się podczas zakładania, a następnie napęczenia w celu wypełnienia pustych przestrzeni powoduje, iż opracowywane miejsce pozostaje suche i czyste – absolutna konieczność dla obecnych odbudów przy użyciu bondów. Kliny Soft Wedge™ są dłuższe niż standardowe kliny, umożliwiając łatwe dopasowanie pod pierścieniem. Wykonane są z amerykańskiej lipy, co zapewnia najlepsze dopasowanie oraz kształt.

Soft Wedge™

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
WDK4	Zestaw G-Wedge™ po 100 szt w każdym rozmiarze	400/szt.	390 zł

Uzupełnienie

WDYL	kliny żółte X-Small	300/szt.	324 zł
WDBL	kliny niebieskie Small	300/szt.	324 zł
WDOR	kliny pomarańczowe Medium	300/szt.	324 zł
WDGR	kliny zielone Large	300/szt.	324 zł



WDK4

BlueView[®] VariStrip[™]

Konturowane paski do zębów przednich.



Zmienna wysokość, od 6 do 10 mm umożliwia dostosowanie do wysokości korony wszystkich przednich zębów.

Paski Blue View VariStrip[™] są rewolucyjnymi, anatomicznie ukształtowanymi paskami do zębów przednich, zapewniającymi optymalne zaokrąglenie oraz optymalną wysokość paska, odpowiednimi praktycznie do każdej odbudowy przednich zębów. Plastikowy, anatomicznie ukształtowany pasek o grubości 0.05 mm zwęża się od jednego końca do drugiego. Umożliwia to założenie paska w punkcie styczonym, a następnie przesuwanie go do momentu aż będzie odpowiadał właściwej wysokości korony zęba. Wstępne ukształtowanie paska umożliwia łatwe odtworzenie anatomii zgryzowo dziąsłowej oraz uniknięcie płaskich powierzchni w niszach międzyzębowych.

Wypukły kształt: Zapewnia optymalne uwypuklenie oraz wysokość paska, umożliwiając wykonanie praktycznie każdej odbudowy przednich zębów.

Niebieski odcień: Zapewnia kontrast pomiędzy formówką a tkanką twardą zęba, nie utrudniając polimeryzacji kompozytu.

Blue View VariStrip[™]

Produkt	Opis	Ilość	Cena
VS01	VariStrip [™]	100/szt.	472 zł
VS02	VariStrip [™]	50/szt.	263 zł
VS03	VariStrip [™]	20/szt.	152 zł



Dr. Martin von Sontagh, Austria

- Pozwala uniknąć płaskich powierzchni w niszach międzyzębowych oraz powstania miejsc w których może gromadzić się pokarm, co może mieć miejsce w przypadku pasków metalowych starego typu.
- Doskonałe do ubytków klasy IV, usuwania diastemy, etc.



Dr. Gabriele Conte, Italy

Nowość

Diamantowe paski ściernie

Paski podziałowe FitStrip™ są doskonale zaprojektowane do usuwania nawisów kompozytu i nadmiaru cementu z trudno dostępnych obszarów podziałowych. Te paski są o 33% węższe w porównaniu ze standardowymi paskami FitStrip™, a przy tym mają tylko 2,5 mm wysokości. Paski mają środkową, nieścierną strefę bezpieczeństwa dzięki której, łatwo ześlizgują się przez punkt styczny nie niszcząc go. Diamantowy nasyp umożliwia szybkie czyszczenie i zapewnia jedwabiście gładkie wykończenie.

Przekręć! Przekręć kolorową końcówkę aby dopasować krzywiznę paska FitStrip™ a zablokuje się ona w pożądanym miejscu.

Poręczny uchwyt! Dołączany uchwyt FitStrip™ sprawia ogromną różnicę zarówno dla łatwości użycia przez lekarza jak i komfortu pacjenta.

Gotowy na maraton! Końcówki FitStrip™ są bardzo trwałe. Pozostają ostre i gotowe do pracy nawet po wielu cyklach sterylizacji.

Pozostań w strefie

- Strefa bezpieczeństwa to obszar bez nasypu diamentowego, który chroni punkt styczny
- Super cienkie - tylko 0,05 mm!
- Wsuwa się łatwo i bezpiecznie między zęby.

Wąski pasek

- 33% węższy niż standardowe paski FitStrip™
- Tylko 2,5 mm wysokość

Zaczynaj odważnie - kończ gładko

1. Średnio ziarnisty nasyp pomaga szybko usuwać nadmiary
2. Drobnio ziarnisty nasyp wygładza
3. Super drobny nasyp nadaje się idealnie do polerowania.



NOWOŚĆ!

Instrukcja użycia:

1. Wsuń pasek między zęby. Począwszy od paska ze średnim nasypem (niebieska końcówka), przekręć kolorową końcówkę, aż pasek zostanie zablokowany w pozycji prostej. Ustaw strefę bezpieczeństwa w miejscu punktu styčnego. Delikatnym naciskiem i lekkim ruchem do przodu, wsuń pasek między zęby*. Końcówka, może być w tym momencie przekręcona do pozycji zakrzywionej aby pasek mógł dopasować się do naturalnego konturu zęba.
2. Usuń nawis / nadmiar cementu. Poruszaj Fitstrip™ delikatnym ruchem policzkowo-językowy do przodu i do tyłu. Wyjmij FitStrip™ i sprawdź obszar za pomocą nici dentystycznej, aby upewnić się, że punkt styčny jest poprawny. W razie potrzeby powtórz.
3. Wykończenie i wypolerowanie. Umieść końcówkę FitStrip™ z drobno ziarnistym nasypem (czerwona końcówka) w przestrzeni międzyzębowej przy użyciu metody z kroku pierwszego. Poruszaj nim delikatnym ruchem policzkowo-językowym do przodu i do tyłu, trzy lub cztery razy. Usuń pasek i powtórz proces paskiem z super drobnym nasypem (końcówka żółta), aby uzyskać idealny połysk.

*Jeżeli zęby są sklejone lub punkt styčny jest zbyt ciasny, użyj ząbkowanego paska FitStrip™ (szara końcówka) aby uzyskać 0,05 mm przerwy między zębami aby włożyć pasek.


Zestaw pasków podziałowych wraz z paskami jednostronnymi:

- 2 podziałowe paski z bardzo drobnym nasypem
- 2 podziałowe paski z drobnym nasypem
- 1 podziałowy pasek ze średnim nasypem
- 1 ząbkowana piła
- 4 paski jednostronne (po 1 z każdego rodzaju .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm)
- 2 uchwyty




FPSK08

Produkt	Opis	Cena
FPSK07	NOWOŚĆ Zestaw pasków podziałowych: 3 podziałowe paski z bardzo drobnym nasypem, 3 podziałowe paski z drobnym nasypem, 3 podziałowe paski ze średnim nasypem, 1 ząbkowana piła, 2 uchwyty	735 zł
FPSK08	NOWOŚĆ Zestaw pasków podziałowych wraz z paskami jednostronnymi: 2 podziałowe paski z bardzo drobnym nasypem, 2 podziałowe paski z drobnym nasypem, 1 podziałowy pasek ze średnim nasypem, 1 ząbkowana piła, 4 paski jednostronne (po 1 z każdego rodzaju .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm), 2 uchwyty	735 zł
FPSS03	NOWOŚĆ Zestaw próbny pasków podziałowych: 1 podziałowy pasek z bardzo drobnym nasypem, 1 podziałowy pasek z drobnym nasypem, 1 podziałowy pasek ze średnim nasypem	270 zł

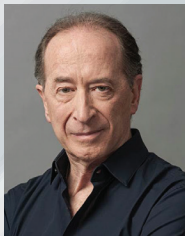

Dott. R. Becciani

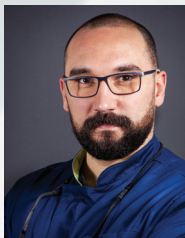

Dott. V. Attanasio

"FitStrip™ to doskonale narzędzie do precyzyjnego i kontrolowanego zarządzania obszarami międzyzębowymi. Niezwykła ergonomia zapewnia tę zaletę, że nie trzeba używać długich pasek ściernych, które często mogą powodować skaleczenia ust i tkanek miękkich pacjenta. Różna wielkość nasypu pozwala na precyzyjne użycie w każdym stanie klinicznym, a końcówka z piłą gwarantuje otwarcie przestrzeni międzyzębowych zamkniętych starymi uzupełnieniami, nadmiarem cementu lub kompozytu jednym, prostym i bardzo szybkim krokiem. Fitstrip™ to wszechstronne narzędzie, przydatne w różnych sytuacjach, od stomatologii zachowawczej, protetyki aż do ortodoncji."



Fig. 1 Klucz IPR został użyty do oceny przestrzeni międzyzębowej, która ma być dostosowana na potrzeby ortodontyczne.

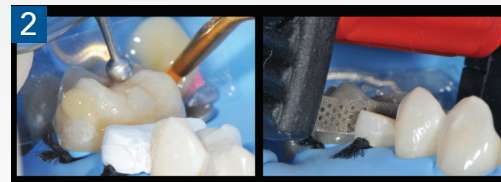


Fig. 2 Wykańczanie obszaru między proksymalnego, po cementowaniu uzupełnień pośrednich.



Fig. 3 Oddzielanie zębów przypadkowo połączonych kompozytem.



Fig. 4 Oczyszczanie prowizoriów z żywicy lub cementu.

Fit Strip™
Flexible
Interproximal
Twistable



Fig. 5 Usunięcia tymczasowych mostów Maryland.



Fig. 6 Usuwanie punktów styčných podczas przygotowywania zębów pod licówki.



Fig. 7 Przygotowanie międzyzębowej linii wykończeniowej w uzupełnieniach bezpośrednich w odcinku przednim.



Fig. 8 Usuwania starych wypełnień kompozytowych w celu ułatwienia założenia koferdamu lub matrycy.



System FitStrip™ do wykańczania i konturowania przestrzeni międzyzębowych.



FPSK05

- Zwykle przekreślenie oznaczonego na kolorowo korpusu reguluje pasek z pozycji prostej do zaokrąglonej i doskonale nadaje się do:
 - konturowania powierzchni międzyzębowych przy wypełnieniach kompozytowych (ustawienie zaokrąglone)
 - redukowanie punktu stycznego przed lub po odbudowie (ustawienie proste)
- Najlepsze rozwiązanie w ortodoncji aby wysmuklić zęby, przy zabiegach ortodontycznych takich jak Clear Correct™, Invisalign™, Six Month Smiles™
- Nadaje się do wielokrotnej sterylizacji i czyszczenia.



Nr produktu	Opis	Cena
FPSK04	10 pasków (po 1 pasku jedno- i dwustronnym z każdego rozmiaru) 2 uchwyty 1 wskaźnik IPR	889 zł
FPSK05	10 pasków (po 2 paski dwustronne z każdej grubości) 2 uchwyty 1 wskaźnik IPR	889 zł
FPSK01	2 uchwyty 2 paski ząbkowane FitStrips 4 paski jednostronne FitStrips (każdej gradacji) 4 paski dwustronne FitStrips (każdej gradacji)	808 zł



System FitStrip™
do wykańczania
i konturowania
przestrzeni
międzyzębowych.

FPSGAUGE
wskaźnik
grubości IPR
Cena 164 zł




Rozmiary		jednostronne	dwustronne	4 sztuki	1 sztuka
Super Fine/żółty 15 Micron		FPSXFSS-4 wysokość 0,08 mm	FPSXFDS-4 wysokość 0,11 mm	349 zł	94 zł
Fine/czerwony 30 Micron		FPSFSS-4 wysokość 0,10 mm	FPSFDS-4 wysokość 0,15 mm	349 zł	94 zł
Medium/niebieski 46 Micron		FPSMSS-4 wysokość 0,13 mm	FPSMDS-4 wysokość 0,21 mm	349 zł	94 zł
Coarse/zielony 90 Micron		FPSCSS-4 wysokość 0,18 mm	FPSCDS-4 wysokość 0,30 mm	349 zł	94 zł
Serrated/szary		FPSSAW-4 wysokość 0,05 mm		349 zł	94 zł
Medium/biały		–	FPSTMDS-4 wysokość 0,40 mm	349 zł	94 zł
Medium/czarny		–	FPSXTMDS-4 wysokość 0,50 mm	349 zł	94 zł
Super Fine/żółty 15 Micron		FPSGXFSS-4 wysokość 0,08 mm	N/A	349 zł	94 zł
Fine/czerwony 30 Micron		FPSGFSS-4 wysokość 0,10 mm	N/A	349 zł	94 zł
Medium/niebieski 46 Micron		FPSGMSS-4 wysokość 0,13 mm	N/A	349 zł	94 zł
Zamienne uchwyty Fitstrip™ (2 sztuki) FPSHANDLE-2					123 zł

PerForm
Proximal Contact Instruments




Jak działa PerForm™:

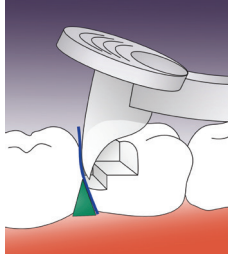


KROK 1:

Nalóż pierwszą warstwę kompozytu
Wciśnij PerForm w niespolimeryzowaną warstwę kompozytu i popchnij (dystalnie).

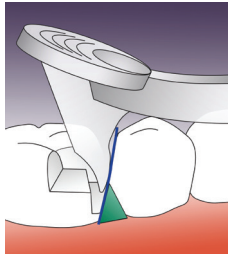

lub pociągnij (mezjalnie).

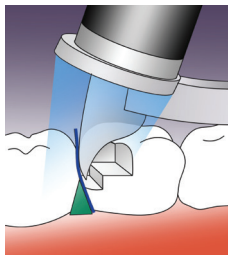

KROK 2:

Umieść lampę polimerizacyjną bezpośrednio na soczewce Fresnela i rozpocznij polimeryzację.

PerForm™ daje kontrolę.


- Poprawia punkty styczne niezależnie od systemu formówek
- Kontroluje wysokość i szerokość punktu stykowego
- Zwiększa ciasność punktu stykowego
- Unikatowa soczewka wspomaga dyfuzję światła w lampie.

PerForm™

Produkt Opis

CFK01	Zestaw PerForm™ - po 1szt w każdym rozmiarze
CF100	Małe narzędzia 1.1 mm
CF200	Duże narzędzia 2.0 mm

Ilość	Cena
1 szt.	499 zł
2/szt.	499 zł
2/szt.	499 zł

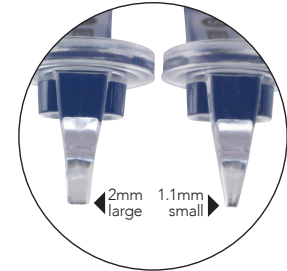

„W celu zapewnienia ciasnego punktu stykowego, należy aplikować pojedynczą warstwę płynnego kompozytu do poddziąsłowej części ubytku, a formówkę docisnąć do sąsiadującego zęba przy pomocy narzędzia do formowania punktów stykowych „PerForm”.

To sprawia, że punkt stykowy jest ciasny i prawidłowo uformowany podczas polimeryzacji”

Dr. Jack D. Griffin, Jr. USA

eZr™ gumki do polerowania umożliwiają dentystom bezpieczne i łatwe dopasowanie zarówno uzupełnień z cyrkonu, jak też dwukrzemianu litu.



- 1 Rozpocznij od wstępnego dopasowania i konturowania przy pomocy niebieskich gumek z gruboziarnistym nasypem. Użyj płasko zakończonych końcówek do powierzchni okluzyjnej/wargowej/językowej/policzkowej, a dysku do powierzchni międzyzębowych.



- 2 Następnie skorzystaj z zielonych gumek ze średnioziarnistym nasypem do wygładzenia powierzchni i wstępnego polerowania. Użyj stożka do bruzd na powierzchni okluzyjnej, kielicha do powierzchni wargowej/językowej/policzkowej, oraz dysku do powierzchni międzyzębowych.



- 3 Do końcowego polerowania na wysoki połysk skorzystaj z pomarańczowych gumek z drobnoziarnistym nasypem. Użyj stożka do bruzd na powierzchni okluzyjnej, kielicha do powierzchni wargowej/językowej/policzkowej, oraz dysku do powierzchni międzyzębowych.



FPZK01-X - eZr™ Kit

Zestaw FPZK01-X

Zestaw 8 gumek

2 gumki do usuwania nadmiaru materiału (niebieskie)

3 gumki do wygładzania i wstępnego polerowania (zielone)

3 gumki do polerowania na wysoki połysk (pomarańczowe)

Cena 804 zł

Wprowadzanie poprawek z eZr. dla Ciebie!

Prawidłowa obróbka cyrkonu jest od dłuższego czasu zagadnieniem kontrowersyjnym, z uwagi na zagrożenie mikrouszkodzeniami. Wykańczanie tego materiału przy pomocy odpowiednich narzędzi jest teraz możliwe i zapewnia długotrwałą stabilność odbudowy.

System polerujący eRz™ dostarcza rozwiązanie, które nie tylko zapewnia estetyczny rezultat końcowy w odniesieniu do cyrkonu, ale też zwiększa trwałość fizyczną poprzez polerowanie. Jest teraz możliwe uzyskanie dokładnie wypolerowanych, trwałych powierzchni cyrkonu.

Gumki do polerowania są trwałe, a w połączeniu z właściwościami pozwalającymi na szybkie usuwanie materiału dają wydajny i szybki system pozwalający momentalnie uzyskać wysoki połysk, bez konieczności użycia pasty polerującej.

- Umożliwia bezpieczne i łatwe dopasowanie w odniesieniu zarówno do cyrkonu, jak też dwukrzemianu litu.
- Opracowane przez nas gumki z diamentową powłoką ograniczają ryzyko wystąpienia odprysków oraz mikrouszkodzeń.
- Zapewnia niezrównanie gładko wypolerowaną powierzchnię okluzyjną, eliminując ścieranie przeciwnych zębów.
- Ogranicza efekt przegrzania, który może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia materiału.
- Eliminuje konieczność korzystania z pasty do polerowania, redukując tym samym koszty przeprowadzenia całej procedury.

	Produkt	Opis	Nasyp	Cena
	FPZC030-X	szeroki stożek odwrócony, nasyp zgrubny, 5-szt/op	Usuwanie nadmiarów	644 zł
	FPZC010-X	stożek z płasko ściętym wierzchołkiem, nasyp zgrubny, 5szt/op	Usuwanie nadmiarów	484 zł
	FPZM010-X	stożek mały zielony, nasyp średni 5-szt/op	Wygładzanie i wstępne polerowanie	197 zł
	FPZM020-X	stożek duży, nasyp średni 5-szt/op	Wygładzanie i wstępne polerowanie	304 zł
	FPZM030-X	soczewka, nasyp średni 5-szt/op	Wygładzanie i wstępne polerowanie	304 zł
	FPZM040-X	zielony kielich, nasyp średni 5-szt/op	Wygładzanie i wstępne polerowanie	304 zł
	FPZF010-X	pomarańczowy mały stożek, nasyp drobny 5-szt/op	Polerowanie na wysoki połysk	197 zł
	FPZF020-X	pomarańczowy duży stożek, nasyp drobny 5-szt/op	Polerowanie na wysoki połysk	304 zł
	FPZF030-X	pomarańczowa soczewka drobny, nasyp 5-szt/op	Polerowanie na wysoki połysk	304 zł
	FPZF040-X	pomarańczowy kielich, nasyp drobny 5-szt/op	Polerowanie na wysoki połysk	304 zł

Composi-Tight® 3DFusion™

Ulepszone kleszcze dla łatwiejszego i precyzyjnego umieszczania pierścienia.



Kleszcze do zakładania pierścieni



FXP01 Ulepszona stal nierdzewna dla lepszej trwałości kleszczy do umieszczania pierścienia

406 zł

Ring Placement Forceps

Holds all your sectional matrix system rings.

Do zakładania wszelkiego rodzaju pierścieni w systemach formówek sekcyjnych.

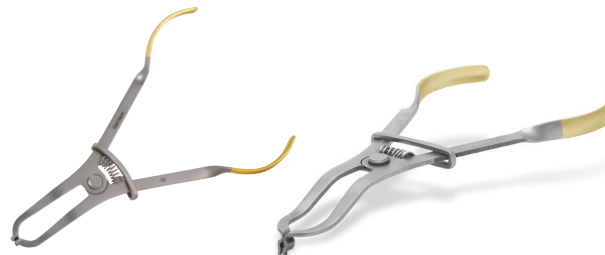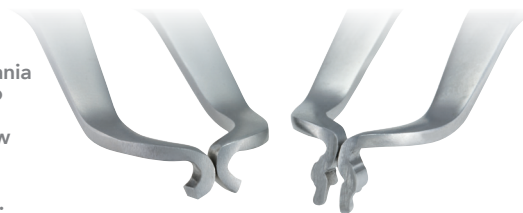

Kleszcze do zakładania pierścieni

AUMRDF-100 kleszcze do zakładania pierścieni 340 zł


Kleszcze uniwersalne

UNVF-100 340 zł




Composi-Tight® Matrix Forceps

Precise Placement, Unbeatable Grip.

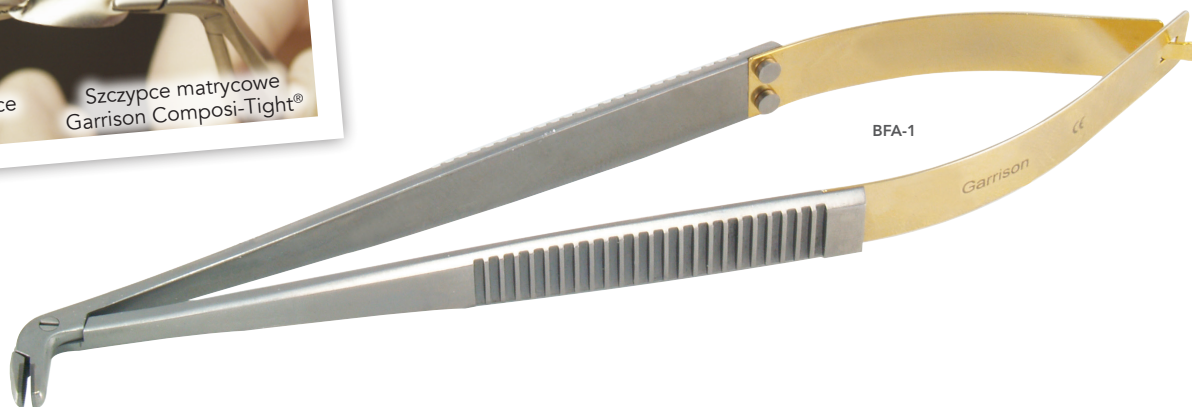

Precyzyjne zakładanie: Końcówka jest wyprofilowana pod kątem 75 stopni, ustawiona w kierunku okluzyjno-dziąsłowym, zapewniając bardziej odpowiedni kąt zakładania niż pęseta do peletek bawełnianych. Mała końcówka z węgla umożliwia uchwycenie formówki za jej górną krawędź w celu zapobieżenia zniekształceniu obszaru punktu stykowego na pasku

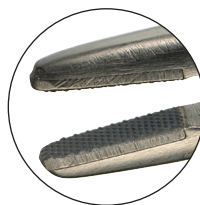

Najlepszy chwyt: końcówka z węgla wolframowego zapewnia doskonały uchwyt oraz pełną kontrolę w przypadkach gdzie dostęp jest utrudniony.

Kleszcze do formówek

BFA-1 z wyprofilowaną końcówką do umieszczania formówek od strony okluzyjnej. 636 zł

Composite Instruments Nonstick titanium-nitride coated

Nasze dwustronne multifunkcyjne narzędzia posiadają upychadła oraz łopatki do modelowania umieszczone na przeciwległych końcach. Przy odbudowie kompozytowej można teraz nakładać, upychać oraz modelować wypełnienie bez konieczności zmiany narzędzi!

- Lekkie uchwyty o dużej średnicy zapewniają ulepszoną ergonomię
- Końcówki posiadają antyadhezyjną powłokę ułatwiającą nakładanie oraz modelowanie kompozytów.
- 40% twardsze niż stal nierdzewna, posiadają mniej porowatą, antyadhezyjną powierzchnię.
- Odporne na różnorodne czyszczenie w tym przy pomocy ultradźwięków oraz sterylizacji



TN009,
Louis Mackenzie,
UK



TN008

5-in-1

Produkt
TN008

Opis

Narzędzie multifunkcyjne 5 w 1
2 upychadła, upychadło kulkowe, łopatka, upychadło stożkowe

Cena

431 zł



TN009

5-in-1

Produkt
TN009

Opis

Narzędzie multifunkcyjne 5 w 1
2 łopatki, 2 upychadła, upychadło stożkowe

Cena

431 zł

CompositeInstruments Nonstick titanium-nitride coated

Narzędzia do kompozytów

TN001



Produkt

TN001

Opis

Narzędzie ze średnimi łopatkami

Cena

185 zł

- Nakładanie kompozytów
- Retrakcja dziąseł w celu modelowania pod linią dziąseł
- Dopasowywanie formówek

TN002



TN002

Narzędzie ze średnią łopatką i średnim upychadłem

185 zł

- Modelowanie ubytków klasy I, II, V
- Nakładanie kompozytu w odbudowach zachowawczych
- Dopasowywanie formówek

TN003



TN003

Narzędzie ze średnią łopatką i z dużym upychadłem

185 zł

- Kształtowanie przy dużych ubytkach klasy I, II, V
- Nakładanie materiału kompozytowego do dużych ubytków
- Wypukła końcówka upychacza minimalizuje ryzyko przyklejenia się kompozytu i wyciągnięcia materiału

CompositeInstruments Nonstick titanium-nitride coated

Narzędzia do kompozytów

Produkt	Opis	Cena
TN004	Narzędzie z super cienkimi łopatkami	197 zł

- Pozwala sięgać pod dziąsło umożliwiając perfekcyjne kształtowanie wypełnienia
- Kształtowanie przestrzeni międzyzębowych
- Upychanie nici w szczelinach dziąsłowych



TN005	Narzędzie z długimi, super cienkimi łopatkami	197 zł
-------	---	--------

- Pozwala głębiej sięgnąć w trudno dostępne miejsca
- Konturowanie i kształtowanie w bocznych zębach
- Kształtowanie przestrzeni międzyzębowych
- Upychanie nici w szczelinach dziąsłowych



TN006	Narzędzie multifunkcyjne z małym i średnim upychadłem.	299 zł
-------	--	--------

- Nakładanie materiałów kompozytowych w mniejsze ubytki klasy II i III
- Upychanie materiału w kierunku dziąseł
- Kształtowanie powierzchni okluzyjnych przy pomocy upychadła stożkowego



Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia:

- Systemy Composi-Tight® składają się z małych elementów o ostrych krawędziach. Zaleca się zastosowanie odpowiedniej izolacji (np. koferdamu) przed rozpoczęciem procedury zabiegu. Podobnie jak w przypadku wszystkich instrumentów wewnętrznych, należy zachować szczególną ostrożność podczas ich użycia i mocowania.
- Drogi oddechowe: w przypadku dostania się klina, matrycy lub pierścienia mocującego do dróg oddechowych należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.
- Przewód pokarmowy: w sytuacji przypadkowego połknięcia elementu systemu należy skierować pacjenta do lekarza celem usunięcia elementu z przewodu pokarmowego. W przypadku nudności lub pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.

Aby uzyskać pełną instrukcję sterylizacji, przejdź na stronę www.garrisondental.com

Instrukcja sterylizacji i czyszczenia pierścieni Composi-Tight® 3D Fusion™, 3D XR™ i 3D

Sterylizacja:

- Stosować wyłącznie certyfikowane torebki lub rękawy do sterylizacji w autoklawie.
- Sterylizować produkt wyłącznie w autoklawie. Stosować cykl sterylizacji w temp. 132 – 134°C i 210kPa przez 6 minut, z czasem schnięcia 20 - 30 minut; podczas sterylizacji należy stosować się do instrukcji producenta. Nie przekraczać temp. 137°C.
- Nie poddawać produktu chemicznym procesom sterylizacji.

Czyszczenie:

- Przed sterylizacją należy usunąć wszelkie widoczne osady.
- W tym celu należy stosować miękkie, nylonowe szczoteczki lub pędzle do czyszczenia. Należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki silikonowej Soft-Face™ w trakcie procesu czyszczenia.
- Jeżeli osad jest w dalszym ciągu widoczny należy powtórzyć powyższą procedurę.
- Nie stosować roztworów zawierających chemikalia takie jak alkohol, aceton lub ketony.

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma Garrison Dental Solutions nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji. Ceny brutto w złotych polskich podane są do celów orientacyjnych.

Garrison

Dental Solutions



Garrison Dental Solutions
150 DeWitt Lane, Spring Lake, MI
49456 USA
Infolinia: 800 919 416
E-Mail: contactme@garrisondental.com
Web: www.garrisondental.com

