CASO **CLÍNICO**



Dra. Dayana
Da Silva
Gonçalves

Chiusura di diastema utilizzando la matrice Blue View VariStrip™

La presenza di diastemi può compromettere l'armonia estetica del sorriso, alterare la proporzione dentaria e persino influenzare la fonetica.
La loro chiusura rappresenta una procedura chiave nell'odontoiatria estetica, soprattutto quando il paziente desidera migliorare l'aspetto generale del proprio sorriso.

Per ottenere un risultato prevedibile e anatomicamente corretto, è fondamentale l'utilizzo di matrici che consentano un adeguato controllo del contorno e del punto di contatto. In questo contesto, la Blue View VariStrip™ rappresenta un'alternativa altamente efficiente, in quanto si tratta di una matrice anteriore preformata che offre una curvatura ottimale e un'altezza adattabile per praticamente qualsiasi restauro anteriore.

Grazie al suo design e al ridotto spessore, facilita la ricostruzione precisa dell'anatomia prossimale, evitando la formazione di spazi (diastemi) e punti di contatto piatti, garantendo così risultati estetici più naturali e funzionalmente stabili.

Garrison
THE LEADER IN MATRIX SYSTEM

Chiusura di diastema utilizzando la matrice Blue View VariStrip™




Stato clinico iniziale. Si osserva diastema tra 32 e 31




Isolamento con diga di gomma



Posizionamento della matrice (Blue View, VariStrip), adattandola allo spessore adeguato in base al dente e adattamento cervicale della stessa

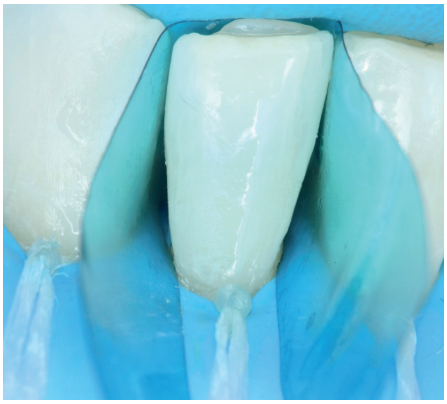

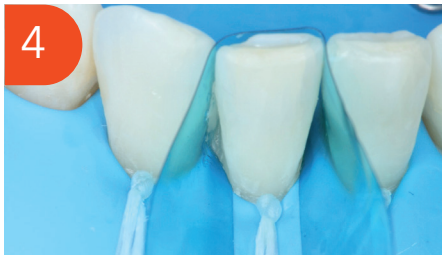

Posizionamento del primo incremento di composito iniziando da cervicale e zona media del dente




Garrison


THE LEADER IN MATRIX SYSTEM

Chiusura di diastema utilizzando la matrice Blue View VariStrip™



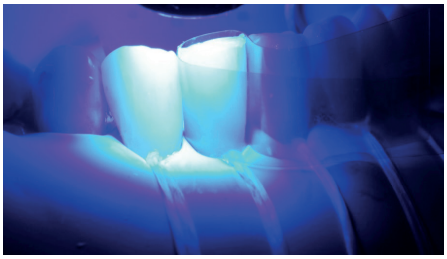



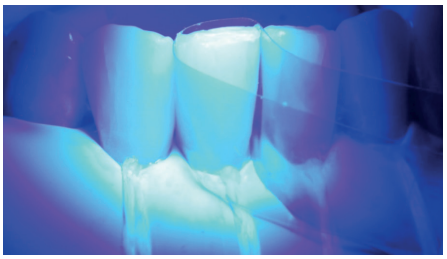

Pieghiamo la matrice verso la parete vestibolare prima cervicale (1), fotopolimerizziamo e poi nella zona media (2) ed essendo translucida possiamo fotopolimerizzare attraverso la matrice

Confronto clinico del prima e dopo



Prima



Dopo

Garrison

THE LEADER IN MATRIX SYSTEM