CASO **CLINICO**



Dra. Dayana
Da Silva
Gonçalves

Chiusura dei triangoli neri utilizzando le matrici Blue View VariStrip™

I diastemi centrali, o triangoli neri, rappresentano una sfida frequente nell'odontoiatria estetica, con un impatto diretto sull'armonia del sorriso, sulla fonetica e sulla ritenzione di biofilm e residui alimentari.


In questo contesto, la chiusura dei diastemi mediante restauri diretti in composito rappresenta un'opzione terapeutica favorevole, il cui successo dipende principalmente dalla modifica dell'anatomia prossimale del dente in modo tale che:

1. Il punto di contatto sia posizionato più apicalmente.
2. L'emergenza prossimale cervicale sia convessa e non piatta.
3. Sia presente uno spazio fisiologico adeguato affinché la papilla possa riempirlo.

Le matrici anatomiche come Blue View VariStrip™ contribuiscono direttamente al raggiungimento di questi tre obiettivi, poiché sono progettate per riprodurre la curvatura naturale della superficie prossimale, guidando la forma del restauro mentre il composito si adatta alla zona interprossimale.
Questo consente un controllo preciso del contorno e del punto di contatto, favorendo il riempimento papillare e il recupero di un'estetica adeguata.

Chiusura dei triangoli neri utilizzando le matrici Blue View VariStrip™

1

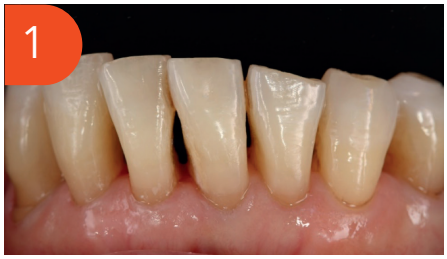

Stato clinico iniziale. Si osservano i diastemi aperti que formano i classici triangoli neri, sgradevoli a livello estetico

2



Isolamento assoluto con diga di gomma

3



Posizionamento della matrice (Blue View, VariStrip), adattamento cervicale della stessa

4



Posizionamento del primo incremento di composito

5



Pieghiamo la matrice verso la parete vestibolare per riprodurre la forma anatomica prossimale

Garrison

THE LEADER IN MATRIX SYSTEM

Chiusura dei triangoli neri utilizzando le matrici Blue View VariStrip™









Si ripetono i passaggi precedenti per gli altri denti

Confronto clinico del prima e dopo



Prima



Dopo

Garrison

THE LEADER IN MATRIX SYSTEM